




THERAPUFF[®]

Inhalocámara Antiestática con válvulas
para inhalador de dosis medida

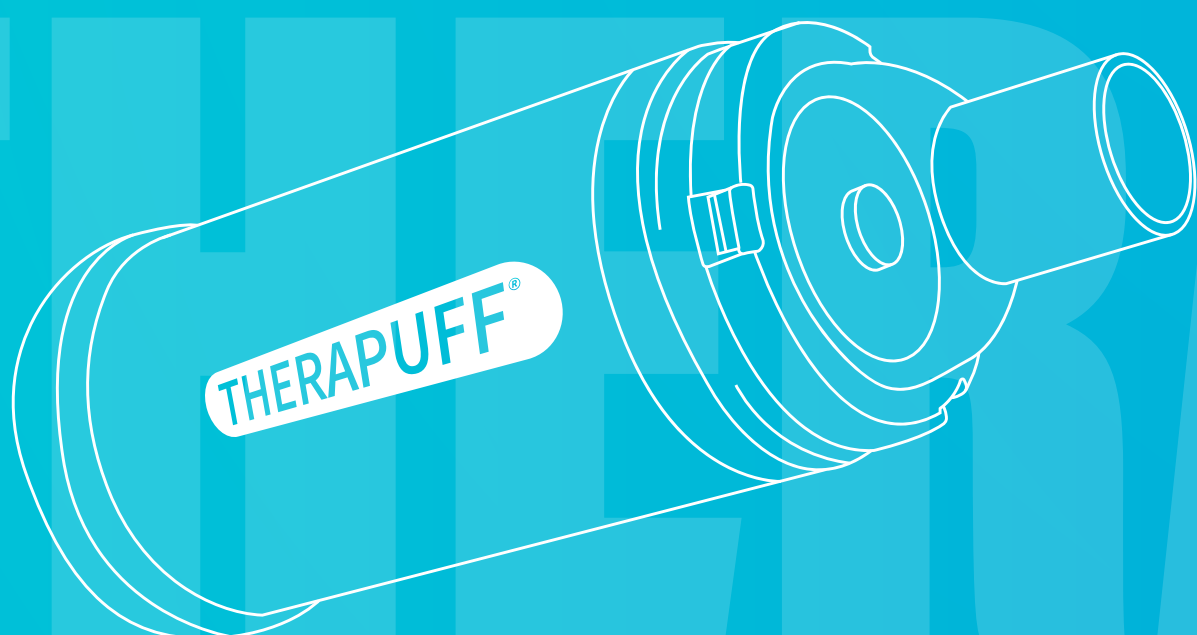

Diseñado para una
mejor inhaloterapia.

THERAPUFF®



Cámara antiestática

El material antiestático especial de la cámara garantiza una suspensión completa del medicamento, mejorando la dosis disponible para el paciente.

Instrucciones de Uso

Gráficos ilustrativos de instrucciones de uso, permite al usuario visualizar la forma de administrar el inhalador de dosis medida.

Válvula unidireccional

El movimiento de la válvula de visión indica la inhalación y permite el control del paciente. La válvula unidireccional es de baja resistencia al flujo, puede abrir con un esfuerzo inspiratorio mínimo (adecuado para pacientes con bajo volumen corriente).

Orificos de ventilación en espiral


Los orificios permiten la ventilación en espiral, diseñada para dirigir el fármaco a la válvula unidireccional, aumentando así la cantidad de partículas de medicamento respirables.

Adaptador universal "Ajuste adecuado"

El material suave y deformable del adaptador garantiza un sellado perfecto con todos los conectores de inhaladores disponible en el mercado.

Máscara comfort & seal

El material suave y el contorno ergonómico aseguran un sellado perfecto con la comodidad para el paciente. Permitir una correcta técnica de inhalación. La válvula espiratoria de seguridad garantiza una exhalación completa de CO₂. Especialmente diseñada para los más pequeños con forma amigable que permite una mejor adaptabilidad.

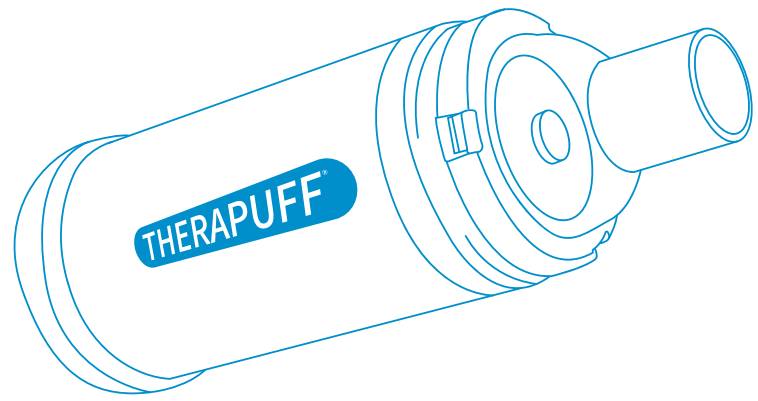

Línea completa para la administración de inhaladores diseñada para cada paciente: Adulto, pediátrica, infante y estándar (Pacientes que no requieren uso de máscara o paciente con traqueostomía).

Especificaciones del producto

Volumen	160ml
Longitud	15.0cm
Diámetro de la boquilla	22mm
Libre de Látex	Si
Libre de DEHP	Si
Uso único por paciente	Si

Información para pedidos

Descripción del producto	Referencia
Therapuff estándar sin máscaras	LMI86-5555
Therapuff Adulto con máscaras	LMI86-5501
Therapuff Pediátrica con máscaras	LMI86-5504
Therapuff Infante con máscaras	LMI86-5505



Therapuff Adulto

- Inhalocámara Therapuff
- Máscara Comfort & Seal Adulto



Therapuff Pediátrica

- 3 - 6 años
- Inhalocámara Therapuff
- Máscara Comfort & Seal



Therapuff Infante

- 0-3 años
- Inhalocámara Therapuff
- Máscara Comfort & Seal



Therapuff Standard

Inhalocámara Therapuff



Escanea este código y descubre toda la información o visita nuestro sitio web.



Bogotá - Colombia

Carrera 68 D # 25 B - 86

Oficina: 518

Tel: 57 (1) 427 2000

Medellín - Colombia

Carrera 43 B # 16 - 41

Oficina: 706

Tel: 57 (4) 266 8426

www.lminstruments.com.co

Unidad Médica de Ventilación y terapia